




# **Cardiosave**

## **Bomba de Balão Intra-aórtico**

Uma Revolução no Suporte Hemodinâmico

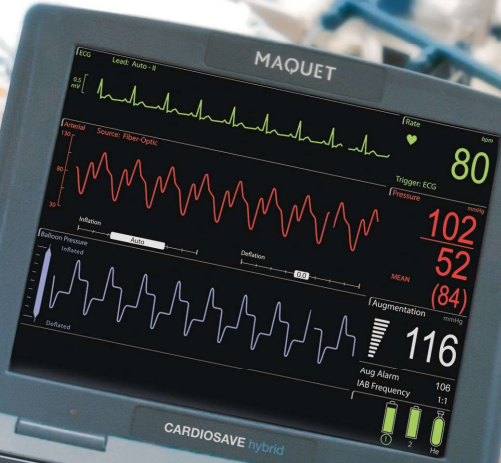

CARDIOSAVE hybrid

Auto

Trigger

Pressure

IB Frequency

Augmentation

Timing

Screen is locked

To unlock press Unlock Screen button

Unlock Screen

Close Menu

Preferences

IB Frequency

Augmentation

Timing

IB Frequency

Augmentation

Timing

# Cardiosave

## Suporte Hemodinâmico, Flexibilidade e Portabilidade

**Disponível quando e onde você precisar** Para aqueles pacientes que precisam de suporte hemodinâmico, não há tempo a perder.

O Cardiosave é um dispositivo de última geração que oferece, de maneira confiável, terapia de contra-pulsção por balão intra-aórtico – tanto em ambientes hospitalares quanto durante a transferência de pacientes. Com o Cardiosave, o suporte hemodinâmico estará no momento certo e no lugar certo.



# Cardiosave Hybrid

## Utilização aprimorada

O Cardiosave Hybrid é um IABP portátil e manobrável, projetado para facilitar a conversão do modo hospital para a configuração de transporte. Ele foi projetado para permitir o uso com todos os IABs da Getinge, para maximizar o investimento do seu hospital.

- A tela de seu monitor retroiluminado e os controles da tela sensível ao toque oferecem uma melhor condição de uso com pouca luz;
- A navegação aprimorada da tela de ajuda resolvem os problemas rapidamente;
- Conexões de interface do paciente bem mais organizadas para uma configuração simples;
- Fácil acesso ao painel de conexão para uma melhor experiência ergonômica;
- Cabo de alimentação auto-retrátil para a segurança dos profissionais de saúde;
- O tanque de hélio é armazenado fora de vista e fora de caminho.



## Garantindo a segurança e o conforto do paciente

O Cardiosave Hybrid mantém a aparência familiar e a mesma operação dos sistemas Datascope/Maquet\* já conhecidos, mas uma análise mais detalhada revela recursos que colaboram para a melhoria geral dos pacientes em estado crítico.

- Algoritmos avançados oferecem gerenciamento mais fácil dos pacientes mais complexos;
- A interface do usuário é intuitiva e mais fácil de usar, minimizando o risco de erros do usuário;
- As conexões definidas e codificadas por cores garantem uma configuração precisa;
- Mais silencioso do que as bombas Datascope/Maquet anteriores para aliviar a ansiedade do paciente.





## Pneumática aprimorada otimiza o aumento diastólico

- Uma maior velocidade pneumática permite que o balão fique inflado por mais tempo durante a diástole.

- HR 80 – 10,0% mais rápido que o CS300 (paciente normotenso)<sup>1</sup>

- HR 150 – 16,4% mais rápido que o CS300 (paciente normotenso)<sup>1</sup>

- Console;
- Carrinho;
- Monitor de controle;
- Tanque de hélio;
- Duas baterias.

**Peso total: 51,8 kg/114**

Todos os pesos ±



<sup>1</sup>Data on file

# Cardiosave Rescue

## Transporta com segurança pacientes em estado crítico

O Cardiosave Rescue foi desenvolvido para atender aos rigorosos desafios de transporte seguro de pacientes em estado crítico por ambulância ou via aérea.

- Algoritmos avançados oferecem gerenciamento fácil de pacientes complexos;
- A navegação aprimorada da tela de ajuda resolve os problemas rapidamente;
- Sistemas de controle sobrepostos garantem a segurança:
  - Baterias de íon-lítio com troca a quente;
  - A fonte de alimentação de transporte AC está incluída;
- As conexões definidas e codificadas por cores garantem uma configuração precisa.



## Características físicas aprimoradas para melhor transporte entre instalações

- Peso mais leve - aproximadamente 40% do peso do CS300 UTS<sup>2</sup>;
- Tamanho menor - aproximadamente 55% do tamanho do CS300 UTS<sup>2</sup>;
- A tela do monitor retroiluminado e o controle da tela sensível ao toque aumentam a possibilidade de uso com pouca luz;
- Conexões de interface do paciente bem mais organizadas para uma configuração aerodinâmica;
- Acesso mais fácil ao painel de controle para uma conveniência ergonômica.



<sup>2</sup> Sistema de Transporte Universal

## Pneumática aprimorada otimiza o aumento diastólico e maximiza o tempo de inflação do balão durante a diástole

• Velocidade pneumática mais rápida:

- HR 80 – 10,0% mais rápido que o CS300

(paciente normotenso)<sup>3</sup>

- HR 150 – 16,4% mais rápido que o CS300

(paciente normotenso)<sup>3</sup>



### Especificações

#### Peso

Incluindo o console Rescue, o monitor de controle e 2 baterias de 24,1 kg/53 lbs.

Todos os pesos ± 5%.

**Tela Fechada** - Inclui console Rescue e monitor de controle de 57,2 cm de altura x 40,6 cm de profundidade x 33,0 cm de largura para 22,5" de altura x 16" de profundidade x 13" de largura;

**Tela Aberta de 90°** - inclui console Rescue e monitor de controle de 78,0 cm de altura x 40,6 cm de profundidade x 33,0 cm de largura para 30,7" de altura x 16" de profundidade x 13" de largura.

Todas as dimensões ± 5%. As dimensões incluem o Módulo Pneumático.




<sup>3</sup>Data on file

## Interface segura e de fácil manuseio

O Cardiosave oferece melhores condições de uso desde o primeiro toque. Ele incorpora uma tela de cristal líquido de última geração e sensível ao toque. O tamanho do painel grande é 24,58 cm x 18,43 cm/9,68" x 7,26", 31 cm/12,1" diagonal que é usada para uma exibição superior da forma de onda e para o controle inferior de tela sensível ao toque.

Isso permite parâmetros maiores de exibição do estado do paciente, melhor navegação na tela de ajuda e telas de controle personalizáveis para aumentar a segurança do paciente. As telas retroiluminadas permitem visibilidade em diferentes condições de iluminação, sem necessidade de fonte de luz alternativa.

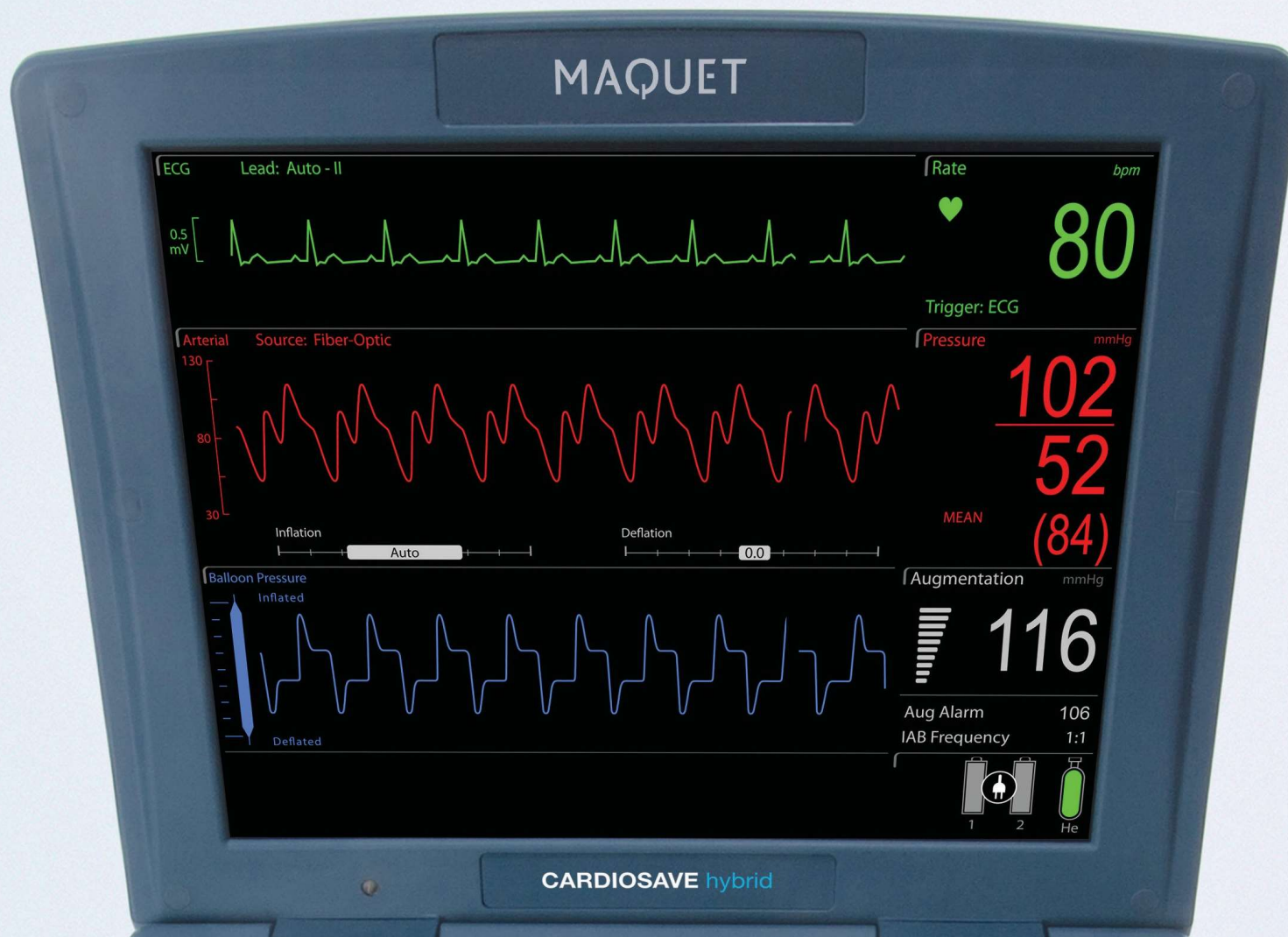




A tela possui bloqueio para garantir a segurança do paciente, impedindo alterações acidentais durante o transporte.



**Cardiosave Hybrid**

**Informações**
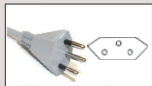
| Produto                                            |                                                                                     | Número da Peça  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Cardiosave Hybrid<br>- Plugue Tipo<br>I AS/NZS3112 |  | 0998-00-0800-31 |
| Cardiosave Hybrid<br>- Plugue Tipo J               |  | 0998-00-0800-32 |
| Cardiosave Hybrid<br>- Plugue Tipo D               |  | 0998-00-0800-33 |
| Cardiosave Hybrid<br>- Plugue Tipo K               |  | 0998-00-0800-34 |
| Cardiosave Hybrid<br>- Plugue Tipo M               |  | 0998-00-0800-35 |
| Cardiosave Hybrid<br>- Plugue Tipo I               |  | 0998-00-0800-45 |
| Cardiosave Hybrid<br>- Plugue Tipo G               |  | 0998-00-0800-   |
| Cardiosave Hybrid<br>- Plugue Tipo B               |  | 0998-00-0800-53 |
| Cardiosave Hybrid<br>- Plugue Tipo E/F             |  | 0998-00-0800-55 |



**Cardiosave Rescue**

**Informações**

| Produto           | Número da Peça  |
|-------------------|-----------------|
| Cardiosave Rescue | 0998-00-0800-83 |



Com a firme convicção de que todas as pessoas e sociedades devem ter acesso aos melhores cuidados possíveis, a Getinge fornece a hospitais e instituições de life science produtos e soluções que visam otimizar fluxos de trabalho e ajudar a melhorar os resultados clínicos. O nosso portfólio inclui produtos e soluções para cuidados intensivos, procedimentos cardiovasculares, salas cirúrgicas, esterilização e life science. A Getinge emprega mais de 10.000 pessoas em todo o mundo e os nossos produtos são vendidos em mais de 135 países.

Getinge Brasil · Av. Manuel Bandeira, 291 - Bloco B - Cj 33 e 34 - V. Leopoldina · São Paulo · SP · Brasil · +55 11 2608 7400

[www.getinge.com/br](http://www.getinge.com/br)