


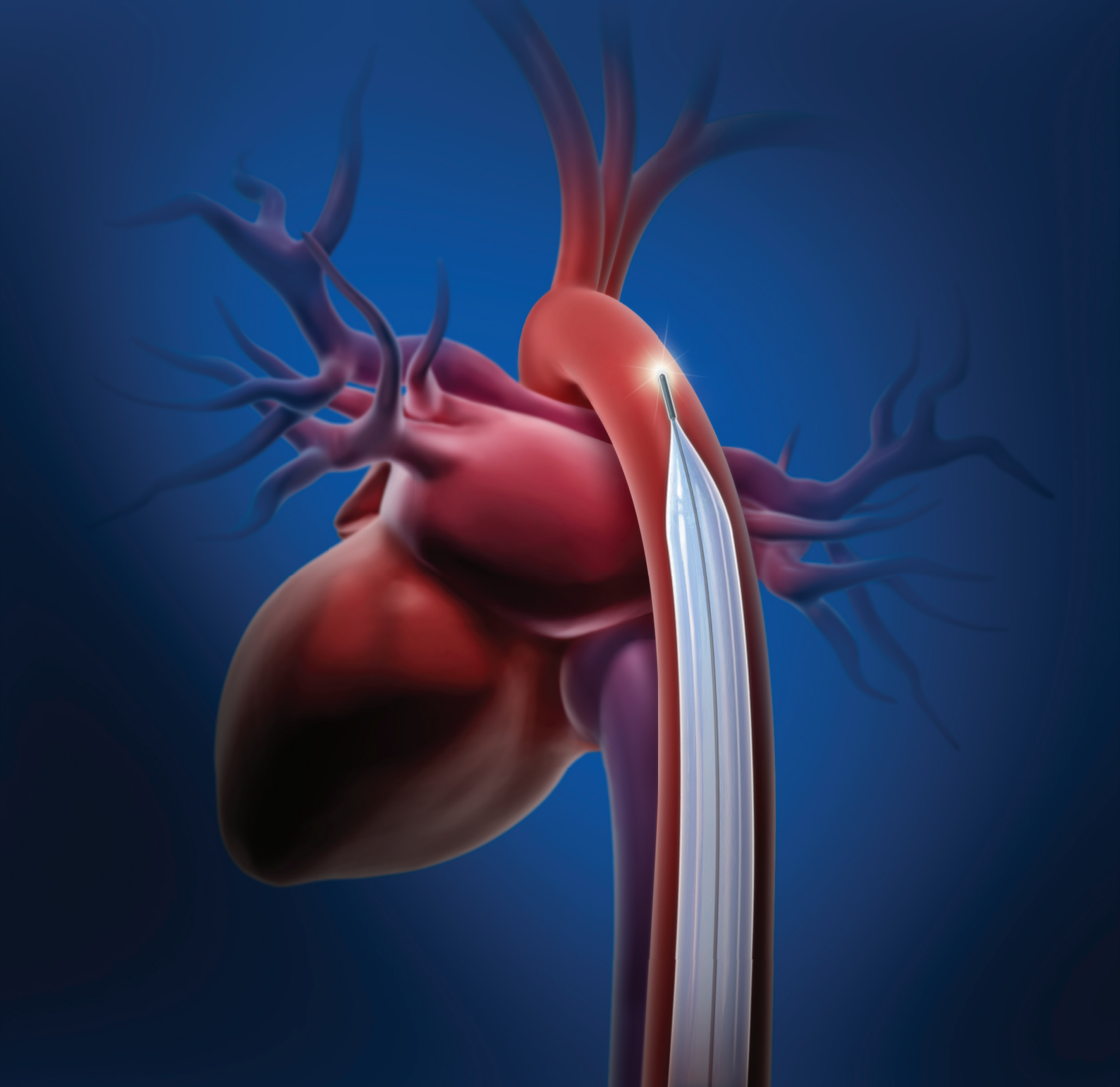

Catéteres BIA

Guia de Referência Clínica

O catéter LINEAR 7,5Fr. de fácil inserção*

– mais facilidade para o médico e para o paciente

Premium Durathane™, a membrana que proporciona melhor desempenho

- Aprimoramento da resistência à abrasão 43%
- Aprimoramento da resistência à fadiga
- Redução da força de inserção
- Enchimento imediato já no início da terapia


Ciclos de tempo de enchimento/esvaziamento mais rápido

- O transporte mais rápido de gás proporciona melhor suporte de frequências cardíacas rápidas e arritmias
- Ciclo de tempo 19% mais rápido em 80° no teste de dobra

O menor tamanho 7.5Fr. é ideal para adultos, diabéticos e pacientes com PVD (doença vascular periférica)

- Redução da área de seção cruzada do catéter em 38% x 9,5Fr.
- Menor tamanho do catéter proporciona aumento do fluxo distal do membro
- Minimiza o tamanho da perfuração arterial
- Fácil inserção em Lumens menores ou vasos comprometidos

Catéter linear 7.5Fr

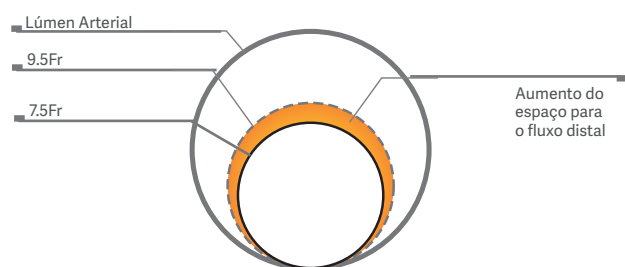


Balão Intra-Aórtico
Novo guia de referência clínica

25cc	34cc	40cc
Aprox. < 152cm	Aprox. 152cm - 162 cm	Aprox. 162cm - 183 cm


Código de Produto	Volume Nominal (cc/ml)	Comprimento Nominal (mm)	Diâmetro do balão 2 psi (mm)	Volume do pré-carga (cc/mm)	Comprimento inserível (mm)	Tamanho ID (pol.)	Tamanho do fio-guia (pol.)
MCA210000048002	40	258	15,0	56	723	0,027	0,025
MCA210000047902	34	221	15,0	56	723	0,027	0,025
MCA210000047802	25	165	15,0	56	723	0,027	0,025

*Todos os códigos do catéter LINEAR vêm com um conector ARROW em seu kit de inserção.

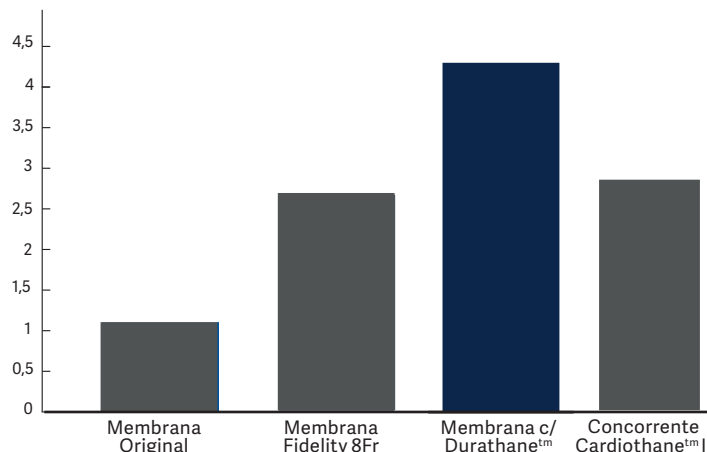

Resistência à Abrasão*

Membrana Linear 7.5Fr
43% melhor que Cardiothane™ II

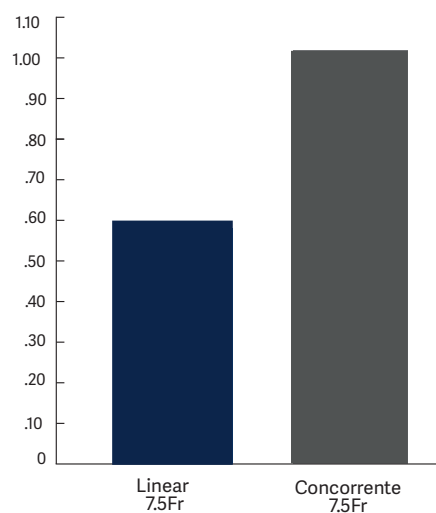

Força de Inserção


Força reduzida em 43%

Um novo catéter BIA MEGA™ 8 Fr. de 50cc

– um novo marco de referência

Melhor rendimento em comparação com os BIA de 40cc, o BIA MEGA de 50cc fornece:

- Deslocamento de volume de sangue de 25% maior
- Expansão e contração melhorada

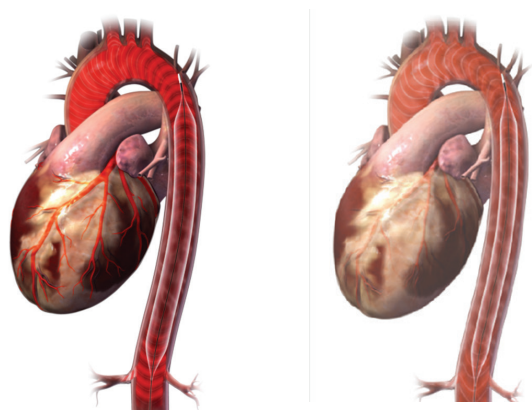

Recursos de segurança

Como outros BIA Ggeting, o catéter MEGA possui várias características que garantem a segurança:


- Manopla em T que mantém a membrana protegida antes de ser utilizada
- O conector-bloqueável reduz a distância entre o dilatador e bainha

A membrana do balão MEGA oferece:

- Melhor resistência à abrasão de 43%
- Melhor resistência à fadiga
- Baixa resistência à inserção
- Inflação imediata

Mais opções. Dependendo das preferências do especialista médico, o catéter MEGA:

- Pode ser inserido sem bainha ou com bainha 8 Fr
- Substitui o BIA 40cc tradicional e também pode ser utilizado em pacientes que necessitam maior expansão

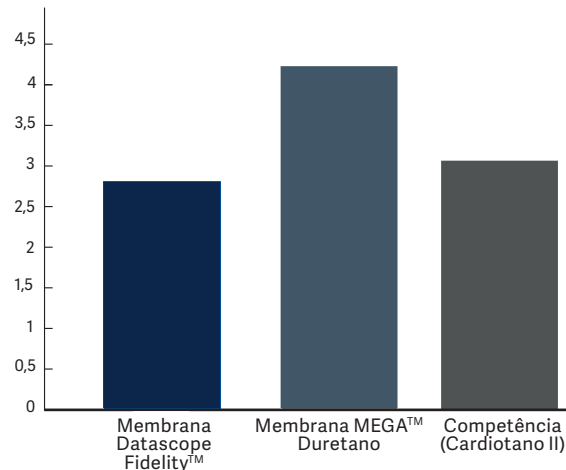

Resistência à abrasão em membranas diferentes

Balão Intra-Aórtico
Novo guia de referência clínica



Código de Produto	Volume do BIA (cc/ml)	Comprimento (mm)	Diâmetro (mm)	Comprimento Inserível (mm)	Tamanho ID (pol.)	Tamanho GUIA(pol.)
MC210000049802	50	258	17,4	723	0,027"	0,025"

*Todos os códigos do catéter MEGA vêm com um conector ARROW em seu kit de inserção.

Catéter SENSATION™ 7Fr- Fibra óptica

– O menor perfil do mercado




Apresentamos o novo catéter Sensation 7Fr:


Combina tecnologia de fibra óptica inovadora que se auto calibra *in vivo*. Sendo menor, é melhor para o paciente, reduzindo potencialmente as complicações vasculares.

Resumo de características e benefícios:

- O sensor de fibra óptica transmite instantaneamente um sinal preciso de pressão ao CS300
- Proporciona uma forma de onda clara e rápida de pressão arterial
- 15% de aumento na quantidade de fluxo distal vc 8 Fr*
- 23% de redução de área de secção cruzada*
- Potencial para diminuição da arteriotomia
- Potencial para redução de isquemia nos membros inferiores
- Melhora de 43% da resistência à abrasão*

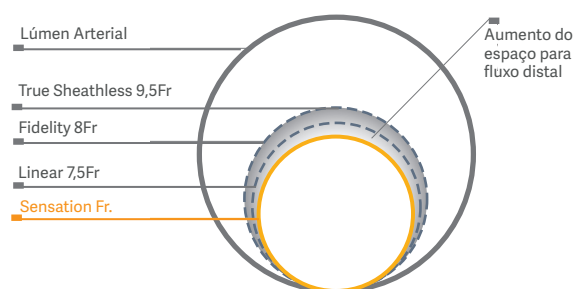

Forma de onda de pressão da fibra-óptica na inserção, antes da calibragem

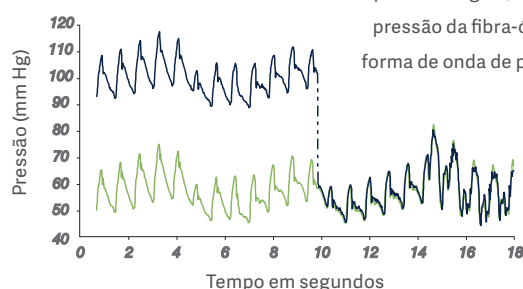

Após calibragem, a forma de onda de pressão da fibra-óptica combina a forma de onda de pressão referência

■ Fibra óptica
■ Millar

Balão Intra-Aórtico
Novo guia de referência clínica

34cc	40cc
Aprox. 152cm - 162 cm	Aprox. 162cm - 183 cm


Número de item	Volume nominal (cc/ml)	Comprimento nominal (mm)	Diâmetro do balão 2 psi (mm)	Comprimento de inserção (mm)	Catéter Tamanho do cabo-guia (pol.)
MCA210000047001	40	258	15,0	714	0,018"
MCA210000046901	34	221	15,0	714	0,018"

INFORMAÇÕES TÉCNICAS


Características dos Catéteres Getinge

Materiais:	Todos os materiais dos balões e catéteres atendem as diretrizes de biocompatibilidade de FDA e ISO para dispositivos e materiais. Os catéteres BIA Linear 7 Fr. e kits de inserção não contém látex.
Embalagem	Bolsa única, tipo descartável (Corner Peel)
Ciclo de vida	1 procedimento
Tempos de prateleira	2 anos a partir da data de esterilização

Todos os parâmetros especificados à temperatura ambiente de 25°C
A Getinge mantém uma política de aprimoramento contínuo de produto, e reserva o direito de alterar materiais e especificações sem notificações.
* Dados em arquivo
** Patente pendente

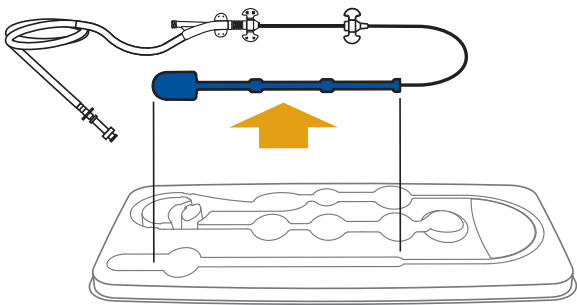

Manopla em T que mantém a membrana protegida antes de ser utilizada

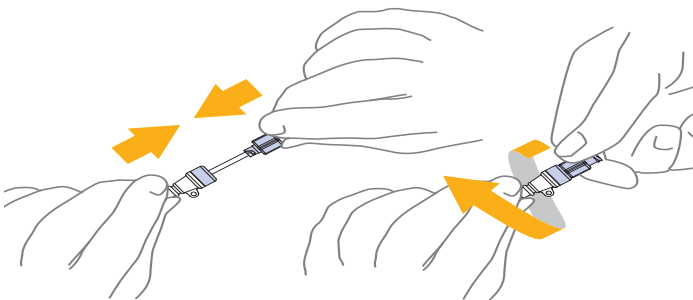

Novo sistema Twist-Lock Introdutor/bainha



Com a firme convicção de que todas as pessoas e sociedades devem ter acesso aos melhores cuidados possíveis, a Getinge fornece a hospitais e instituições de life science produtos e soluções que visam otimizar fluxos de trabalho e ajudar a melhorar os resultados clínicos. O nosso portfólio inclui produtos e soluções para cuidados intensivos, procedimentos cardiovasculares, salas cirúrgicas, esterilização e life science. A Getinge emprega mais de 10.000 pessoas em todo o mundo e os nossos produtos são vendidos em mais de 135 países.

Getinge Brasil · Av. Manuel Bandeira, 291 - Bloco B - Cj 33 e 34 - V. Leopoldina · São Paulo · SP · Brasil · +55 11 2608 7400

www.getinge.com/